

# nanoSkin

Аппарат для ухода за кожей  
лица и тела



ReadySkin

Руководство  
по эксплуатации



# Оглавление

Введение	4
Перед применением	5
Функции прибора	6
Противопоказания и ограничения к использованию	10
Обслуживание и меры безопасности	12
Наименование частей прибора	15
Проведение процедур	17
Cleansing (очищение)	18
Nourishing (увлажнение)	19
Massaging (электростимуляция) или RF (активация коллагена)	20
Cool (охлаждение)	21
Рекомендации по эксплуатации	23
Курсовое применение аппарата	25
Схемы воздействия для лица	26
Укрепление и подтяжка кожи тела	27
Схема воздействия для тела	28
Чистка и обслуживание	31
Зарядка прибора	32
Возможные неполадки и способы их устранения	33
Частые вопросы	34
Технические характеристики	35
Комплектация и гарантия	36
Правила хранения, реализации, транспортировка и утилизации	36

## **Введение**

Спасибо, что выбрали ReadySkin nanoSkin. Этот многофункциональный аппарат с программами предназначен для ухода за кожей лица и тела. Он совместил в себе 5 режимов для молодости, красоты и здоровья вашей кожи: RF-лифтинг, глубокое ионное очищение, питание и увлажнение, электростимуляция и контактное охлаждение.

Аппарат ReadySkin nanoSkin позволяет проводить лучшие косметологические процедуры в домашних условиях, не тратя регулярно время и деньги на походы в салоны и клиники. Бьюти-гаджет подходит для ухода за кожей лица и тела, воздействует эффективно, и при этом деликатно и безопасно. Он комплексно улучшает качество кожи, борется с морщинами, дряблостью и другими несовершенствами. Выполняйте процедуры курсом, и вы увидите заметный и стойкий результат — кожа станет более гладкой, мягкой и упругой, овал лица подтянется, лицо приобретет отдохнувший и здоровый вид. Также аппарат поможет привести в тонус мышцы, убрать целлюлит и лишние жировые отложения.

*Перед проведением процедур необходима предварительная консультация врача-дерматолога.*

## **Перед применением**

Перед выполнением процедур изучите данное руководство по эксплуатации — правильное использование аппарата позволит получить более быстрый и качественный результат. Для большего комфорта в освоении гаджета на YouTube канале бренда представлен информативный видеоурок, в котором наглядно и просто показан процесс выполнения всего комплекса процедур при помощи ReadySkin nanoSkin. Для обеспечения безопасности перед применением внимательно ознакомьтесь с разделом «Обслуживание и меры безопасности».

*Бытовой аппарат ReadySkin nanoSkin не является медицинским оборудованием и предназначен для ухода за кожей в домашних условиях.*

## Функции прибора

*Данная функция работает также в комбинации со следующими режимами:*

- *Cleansing (очистение);*
- *Nourishing (питание и увлажнение);*
- *Massaging (электро-стимуляция).*

*При проведении процедуры RF-коррекции необходимо использовать контактный гель.*

*При проведении процедуры рекомендуется использовать нетканую салфетку, пропитанную очищающим раствором или лосьоном-дезинкрустантом.*

### 1. RF (активация коллагена)

Аппаратная косметологическая методика, основанная на воздействии радиочастотных волн на глубокие слои кожи (дерму и гиподерму). Глубокий прогрев способствует ускорению кровотока, активной выработке коллагена и запуску естественных процессов регенерации и омоложения. В результате кожа омолаживается безопасно, за счет внутренних резервов организма. Повышается тонус, разглаживаются морщины, носогубные складки становятся менее заметными, овал лица подтягивается, кожа становится более гладкой, цвет лица выравнивается.

### 2. Cleansing (очищение)

Воздействие гальванического тока и лосьона-дезинкрустанта вызывает омыление жирных кислот кожного сала — в итоге комедоны превращаются в мыло и легко удаляются из пор. Процедура особенно показана для проблемной и жирной кожи, она поможет быстро и безболезненно избавиться даже от глубоких и плотных комедонов и черных точек, которые плохо поддаются удалению при механической чистке. При этом аппарат действует деликатно и безопасно, не сдавливает и не



травмирует кожу.

*Процедура выполняется около 3-х минут, рекомендуемая частота применения — 1-2 раза в неделю, мощность — на уровне «1» или «2».*

*При проведении процедуры RF-коррекции необходимо использовать контактный гель.*

### **3. Nourishing (питание и увлажнение)**

Электропорация улучшает проникновение активных компонентов косметических средств ухода в глубокие слои кожи. Проводите процедуру с использованием своих привычных кремов, масок, сывороток и эссенций. Так препараты будут впитываться глубже и быстрее, работать значительно эффективнее, а расходоваться заметно экономнее.

*Процедура выполняется около 3 минут, рекомендуемая частота применения — 1-3 раза в неделю.*

*При проведении процедуры требуется использование косметических средств.*

### **4. Massaging (электростимуляция)**

Электростимуляция тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, сокращает жировую прослойку, устраняет дряблость, усиливает четкость контуров и борется с целлюлитом. Режим электростимуляции особенно эффективно работает совместно



с режимом RF-лифтинга. Используйте их вместе, чтобы скорректировать овал лица, избавиться от проблемы второго подбородка и избыточных жировых отложений.

*При проведении процедуры не требуется использование косметических средств.*

## **5. Cool (тонизирующее охлаждение)**

Режим ускоряет сжатие коллагеновых волокон, что позволяет получить быстрый эффект подтяжки. Режим Cool также отлично убирает отечность, успокаивает кожу, оказывает противовоспалительное воздействие, снижает болевую и тактильную чувствительность, минимизирует кожные реакции на различные раздражители.

*Процедура выполняется около 3 минут, рекомендуемая частота применения — 1-3 раза в неделю.*

*Режим предназначен для завершения комплекса процедур. Если вы выполняете несколько процедур в последовательности (к примеру, *Cleansing+RF* и *RF+Massaging*), то режим Cool следует использовать только после режима *Massaging+RF*.*

### **Внимание**

*В данном режиме аппарат работает*





*на высоком напряжении, расход заряда аккумулятора увеличивается и аппарат может нагреваться. Данная особенность не является неисправностью. Для восстановления охлаждения рекомендуется дать прибору остыть не менее 30 минут, не подключая его к зарядному устройству, после чего можно продолжать работу.*



*Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:*

- *глаза;*
- *области сердца и щитовидной железы;*
- *области половых органов.*

## **Противопоказания и ограничения к использованию**

### **Запрещено использование прибора при следующих условиях:**

- беременность и лактация;
- острые инфекционные и вирусные заболевания;
- онкологические заболевания;
- психические заболевания;
- наличие кардиостимулятора;
- заболевания кожи и соединительной ткани (напр., склеродермия, красная волчанка и пр.);
- острые воспалительные и гнойные процессы;
- хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения;
- акне в стадии обострения;
- наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия прибора;
- склонность к образованию келоидов;
- наличие силиконовых имплантатов / гелевой контурной пластики, золотых



нитей, металлических имплантов в области обработки (при наличии металлокерамических коронок допускается использование прибора, но предварительно перед проведением процедуры необходимо изолировать зубной ряд от внутренней поверхности щеки. Для изоляции можете использовать полиэтиленовую пленку или ватный диск. Если под металлическими коронками имеются металлические импланты, то использование в этой области запрещается);

- тяжелые формы сахарного диабета;
- тяжелые стадии гипертонической болезни, нарушение сердечного ритма;
- детский или подростковый возраст;
- прием дерматропных препаратов (напр., роаккутан);
- грипп, ОРВИ, повышенная температура;
- при посещении солярия или в период активного солнечного загара.

## **Обслуживание и меры безопасности**

- Для осуществления правильной работы устройства, пожалуйста, следуйте инструкциям в данном руководстве по эксплуатации.
- Убедитесь, что прибор выключен перед началом работы.
- Проводите регулярную проверку состояния элементов прибора. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.
- Терморегулятор необходимо очищать влажной салфеткой каждый раз после его использования для предотвращения его поломки.
- Не следует сильно тереть терморегулятор во избежание повреждений. При сильном трении или нажатии он может быстро выйти из строя.
- Запрещается эксплуатация в местах с повышенной влажностью (сауны, ванные комнаты) и температурой, под прямыми солнечными лучами.

- После внесения аппарата в теплое помещение с холода, необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедур с использованием nanoSkin запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Во время процедур не рекомендуется многократная обработка одного и того же участка кожи.
- Во время процедур не рекомендуется задерживать работающий аппарат на одном участке кожи.
- Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь прибора, регулярно удаляйте влагу с рабочей поверхности. Категорически запрещается погружать прибор в жидкость.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Не мойте корпус в воде. Протрите корпус мягкой тканью, слегка смоченной в мыльном растворе.
- Не протирайте прибор спиртом, бензином, средством для удаления лака и т. п. Это



может привести к повреждениям и трещинам элементов корпуса, изменению цвета и т. п.


- Не нажимайте кнопку управления прибором острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью и температурой.
- Использование прибора допускается только лицам в возрасте от 20 лет. Перед использованием аппарата людьми с ограниченными физическими возможностями и особенностями умственного развития необходимо ознакомиться с устройством и возможными рисками.
- Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

*Если устройство неактивно, то дисплей автоматически погаснет, а спустя еще минуту устройство полностью выключится.*

## Наименования частей прибора



*Для активации каждого режима после выбора уровня мощности следует повторно нажать «ОК»*

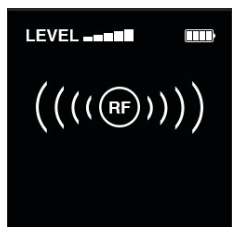

Дисплей



Мощность (регулируется кнопками влево / вправо)



Выбранный режим

## **По умолчанию выбранный режим RF синхронизируется со следующими функциями:**

- **Cleansing (очищение)**  
Комбинация данных режимов обеспечивает глубокое очищение кожи.
- **Nourishing (питание и увлажнение)**  
Функция RF совместно с гальваническими токами ускоряют проникновение косметических средств и усиливают их действие.
- **Massaging (электростимуляция)**  
Функция RF совместно с микротоковой массажной функцией тонизируют мышцы, разглаживают морщины и подтягивают кожу лица и тела.
- **RF (активация коллагена)**  
Функция RF активирует регенерацию белка коллагена и запускает естественные процессы омоложения в коже.
- **Cool (тонизирующее охлаждение)**  
По окончании процедур используйте режим Cool для сужения пор. Данный режим может использоваться самостоятельно при сниженном тоне и отеках.



*Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные косметические средства и гели для создания контактной среды и улучшения скольжения.*

## **Проведение процедур**

В процессе обработки кожи аппаратом вы можете почувствовать легкое покалывание или легкий дискомфорт.

Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении ощутимого дискомфорта следует остановить процедуру и выключить аппарат, если почувствуете боль — стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Для максимальной эффективности процедур и быстрого достижения видимого результата прибор следует использовать регулярно в соответствии с рекомендациями в данном руководстве. В зависимости от потребностей пользователя рабочие режимы можно комбинировать следующим образом: Cleansing+RF, Nourishing+RF, Massaging+RF. При использовании аппарата выберите нужную комбинацию и следуйте дальнейшим инструкциям.

Пользоваться аппаратом ReadySkin nanoSkin очень удобно. Для вашего комфорта в освоении гаджета мы подготовили подробную видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается, как выполнять весь комплекс процедур по уходу за кожей лица и тела. Для просмотра видеоролика





*Чтобы посмотреть видеоинструкцию:*

1. Возьмите смартфон с камерой;
2. Запустите программу для сканирования кода или наведите камеру на код;
3. Желаем приятного просмотра!

*Для проведения процедуры Cleansing рекомендуем использовать гель-дезинкрустант или очищающие средства.*

*В следующих 4-х режимах аппарат автоматически останавливает работу спустя 15 минут после запуска.*

отсканируйте QR-код при помощи смартфона.

## **Cleansing (очищение)**

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений при помощи привычных средств для умывания (не вытирайте лицо насухо после очищения).
2. Снимите кольцо для фиксации, закрепите нетканую салфетку, нанесите на нее гель-дезинкрустант или очищающее средство на непенящейся основе (мицеллярную воду / лосьон).
3. Нажмите и удерживайте центральную кнопку для включения прибора.
4. Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим Cleansing и нажмите центральную кнопку для начала процедуры.
5. Для выбора уровня мощности нажимайте кнопки влево/вправо, а для паузы — центральную кнопку. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и ведите круговыми движениями по массажным линиям. Выполняйте процедуру не более 3-х минут. После завершения процедуры



смойте с кожи остатки косметического средства и очистите аппарат.

### **Примечание**

*Рекомендуем начинать процедуру с уровня мощности «1» и постепенно увеличивать её в зависимости от индивидуальных ощущений, чувствительности и особенностей кожи (во время процедур с режимом RF кожа будет нагреваться).*

### **Nourishing (питание и увлажнение)**

*Для проведения процедуры Nourishing рекомендуем использовать уходовые средства (сыворотки/эссенции) и контактный гель для аппаратных процедур.*

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений.
2. Равномерно нанесите на кожу средство ухода (сыворотку/крем), поверх нанесите контактный гель.
3. Нажмите и удерживайте центральную кнопку для включения прибора.
4. Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим Nourishing и нажмите центральную кнопку для начала процедуры.
5. Для выбора уровня мощности нажимайте



кнопки влево/вправо, а для паузы — центральную кнопку. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и ведите круговыми движениями по массажным линиям. Выполняйте процедуру не более 3-х минут. После завершения процедуры очистите аппарат от остатков средства.

### **Примечание**

*Рекомендуем начинать процедуру с уровня мощности «1» и постепенно увеличивать его в зависимости от индивидуальных ощущений, чувствительности и особенностей кожи (во время процедур с режимом RF кожа будет нагреваться). Во время работы на этом режиме можно ощутить на коже легкое покалывание, эти ощущения будут меняться в зависимости от уровня мощности. Это является нормой.*

*Принцип работы аппарата в этих двух режимах схож.*

*Для проведения процедур RF и/или Massaging рекомендуем использовать контактный гель для аппаратных процедур.*

## **Massaging (электростимуляция) или RF (активация коллагена)**

1. Очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений.
2. Равномерно нанесите на зону обработки контактный гель для процедур.

3. Нажмите и удерживайте центральную кнопку для включения прибора.
4. Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим RF /Massaging.
5. Для выбора уровня мощности нажимайте кнопки влево/вправо, а для паузы — центральную кнопку. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и ведите круговыми движениями по массажным линиям. Выполняйте процедуру в течение 3-х минут. После завершения процедуры очистите аппарат от остатков геля.

### **Cool (охлаждение)**

*Для проведения процедуры Cool использование дополнительных косметических средств не требуется.*

1. После выполнения процедур в других режимах очистите кожу, а также рабочую поверхность аппарата и электроды от остатков геля.
2. Нажмите и удерживайте центральную кнопку для включения прибора.
3. Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим Cool и нажмите центральную кнопку для начала процедуры.

4. Для выбора уровня мощности нажимайте кнопки влево / вправо, а для паузы — центральную кнопку. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже и ведите круговыми движениями по массажным линиям. Выполняйте процедуру в течение 3-х минут. Для выключения нажмите и удерживайте центральную кнопку.

### **Внимание**

*В данном режиме аппарат работает на высоком напряжении, расход заряда аккумулятора увеличивается и аппарат может нагреваться. Данная особенность не является неисправностью. Для восстановления охлаждения рекомендуется дать прибору остыть не менее 30 минут, не подключая его к зарядному устройству, после чего можно продолжать работу.*

### **Примечание**

*Во всех режимах работы, кроме режима Cool, аппарат автоматически останавливает работу спустя 15 минут после запуска. Во время выполнения процедур с режимом RF кожа будет нагреваться, в режимах Nourishing и Massaging может возникнуть ощущение легкого покалывания.*



## **Рекомендации по эксплуатации**

*При первичном использовании прибора рекомендуется работать на минимальном уровне мощности «1».*

Различные комбинации функций могут быть использованы совместно. Например, Massaging (или RF активация коллагена)+Cool. Каждый из режимов можно использовать самостоятельно, исходя из ваших потребностей. Например, если вы часто делаете макияж, то после его удаления с лица вы можете использовать прибор в режиме Cleansing после умывания. Если косметические уходовые средства недостаточно поглощаются кожей, то включите режим Nourishing после нанесения косметики на кожу. Если вы хотите проработать контуры лица, уменьшить размеры лица, проработать тело, то вы можете использовать функцию Massaging. Если у вас тусклый цвет лица, имеются пятна и выраженные признаки старения кожи, то проведите работу прибором в режиме RF (активация коллагена).

***Не злоупотребляйте процедурами***  
*Пожалуйста, следуйте рекомендациям по временному использованию режимов. Рекомендуется проводить работу в режиме Cleansing — 1-2 раза в неделю. Режим Nourishing — 1-2 раза в неделю. Работа в режимах RF и Massaging осуществляется 1-3 раза в неделю. Функция Cool используется*



*после работы в любом режиме. Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении дискомфорта следует прекратить работу.*





*После прохождения основного курса рекомендуется пройти поддерживающий курс.*

*Данный курс предназначен для лица и тела. Работа по телу осуществляется в режимах Massaging и Cool.*

*После прохождения основного курса рекомендуется пройти поддерживающий курс.*

## Курсовое применение аппарата

Режим	Основной курс		Поддерживающий
	2 недели	4 недели	4 недели
RF (активация коллагена)	1 раз в неделю	3 раза в неделю	1 раз в 2 недели
Cleansing (RF+ионное очищение)	1 раз в неделю	2 раза в неделю	1 раз в неделю
Nourishing (RF + электропорация)	1 раз в неделю	2 раза в неделю	1 раз в неделю
Massaging (RF+электростимуляция)	1 раз в неделю	3 раза в неделю	1 раз в 2 недели
Cool (охлаждение)	Используется только для завершения после последней процедуры (не нужно использовать аппарат в режиме Cool после каждого режима)		

*Эффект от процедур является накопительным и усиливается в течение 2-4 недель. Количество процедур зависит от состояния кожи и подкожно-жирового слоя.*

*Рекомендуем проводить процедуры со специализированными косметическими средствами.*

## Схемы воздействия для лица



### Шаг 1

Ведите прибором вверх вдоль челюсти к ушам.



### 2

Ведите прибором вверх от уголков рта к ушам.



### 3

Ведите прибором вверх от носа до места над ушами.



### 4

Медленными круговыми движениями ведите прибором от переносицы по лбу до линии роста волос.



### 5

Медленными движениями ведите прибором по обеим сторонам носа.



### 6

Медленно ведите прибором снизу вверх по обеим сторонам шеи, избегая области щитовидной железы.

*Перед процедурами с использованием аппарата папоSkin не используйте жесткие щетки и мочалки, средства с абразивными частицами. Также не рекомендуется растирать кожу полотенцем.*

*Запрещено проводить процедуру по сухой коже.*

*Рекомендуется начинать процедуры с уровня мощности «1». При проведении процедуры следите, чтобы прибор не оставался неподвижно на одном месте. При ощущении сухости на коже следует дополнительно нанести контактный гель.*

*При работе по телу косметические средства не используются (достаточно только контактного геля). Режим Cool может использоваться самостоятельно при сниженном тоне и отеках.*

## Укрепление и подтяжка кожи тела

### Шаг 1

Примите душ и очистите кожу тела с помощью уходовых средств (рекомендуем применять водные процедуры с гелем для душа).

### 2



Нанесите на обрабатываемый участок тела контактный гель для процедур.

### 3

Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим RF+Massaging. Установите уровень мощности. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже. Ведите по линиям, указанным в разделе «схемы воздействия для тела» на странице 28.

### 4

Нажатиями кнопок вверх/вниз выберите режим Cool. Уровень мощности в данном режиме не устанавливается. Прижмите рабочую поверхность аппарата к коже. Ведите по линиям, указанным в разделе «схемы воздействия для тела».

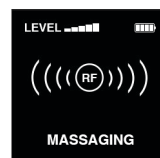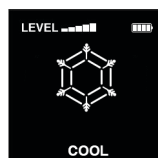


## Схемы воздействия для тела




### Шаг 1

Плавно ведите прибором от центра зоны декольте к плечам.

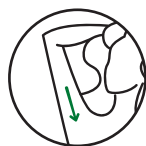


### 2

Приложите прибор к середине внутренней стороны плеча. Плавно ведите в направлении подмышечной впадины.

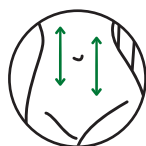


### 3 (на выбор)

Приложите прибор перпендикулярно к животу от пупка на расстоянии, примерно равном ширине двух пальцев. Плавно ведите прибор вверх-вниз от ребра к нижней части живота, а затем обратно в сторону ребер.

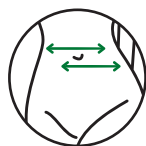

### 4 (на выбор)

Приложите прибор перпендикулярно животу в области талии. Плавно ведите аппарат по направлению к бокам.

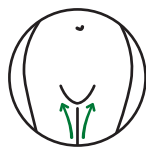

### 5

Приложите прибор к внутренней

стороне бедра и затем плавно ведите его в направлении паха.



**6** Приложите прибор перпендикулярно к коже, плавно передвигайте от центра ягодиц к наружному краю.

*После процедуры необходимо обеспечить коже достаточное увлажнение и ускорить процессы регенерации и образования нового коллагена. Нанесите на места проведения процедур восстанавливающий крем.*

### **Заметки**

- 1. Категорически запрещено направлять прибор к середине горла.*
- 2. Ни в коем случае не применяйте прибор для воздействия непосредственно на глаза.*
- 3. Рекомендуется проводить процедуры круговыми движениями, регулируя скорость в соответствии с индивидуальными ощущениями.*
- 4. Контролируйте температуру нагрева кожи. При появлении дискомфорта следует уменьшить уровень мощности нажатиями*

*на кнопки влево/вправо.*

- 5. Используйте низкий уровень интенсивности при проведении процедур около глаз. Для лица выбирайте меньшую мощность.*
- 6. Следите за тем, чтобы прибор не оставался неподвижным на одном месте и не сжимайте кожу во время проведения процедур.*



## **Чистка и обслуживание**

- Перед работой тщательно очищайте головку прибора и электроды.
- Протирайте магнитное кольцо и терморегулятор с помощью хлопчатобумажной или мягкой ткани.
- Обратите внимание на чистку и техническое обслуживание устройства.
- Запрещается мыть прибор в воде.

*Для зарядки устройства в первый раз или при низком заряде батареи.*

## **Зарядка прибора**

Вставьте один конец адаптера в зарядную базу и подключите вилку адаптера к источнику питания (к бытовой розетке).

Аппарат также можно заряжать напрямую, подключив один конец адаптера к разъему для зарядки на самом устройстве.

Когда прибор заряжается, то экран загорается и индикатор заряда начинает мигать.

Время полной зарядки аккумулятора составляет ~3,5 часов.

По завершении заряда вытащите адаптер питания из розетки и держите его согласно технике безопасности.





*Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера*

*по телефону  
8 800 755-56-29*

*или e-mail  
garotdel@mail.ru*

## **Возможные неполадки и способы их устранения**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Решение</b>
Не заряжается	Прибор неправильно подключен к зарядному устройству	Поместите прибор в зарядную базу, устройству, чтобы подключить его к зарядному устройству
	Зарядная база неправильно подключена к бытовой розетке	Подключите зарядное устройство к бытовой розетке или проверьте ее исправность
Не включается	Неправильно нажимаете кнопку питания	Нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении 2 секунд
	Аккумулятор прибора разряжен или низкий заряд батареи	Зарядите устройство
Другое	Нет подключения	Удерживайте кнопку питания для включения
	У встроенного аккумулятора закончился срок службы	Обратитесь к продавцу
	Не выбран режим	Выберите режим
	Время работы истекло	Выберите режим снова

## Частые вопросы

### Вопрос

Зачем зажимать хлопковую ткань магнитным кольцом?

### Ответ

Хлопковая ткань поможет лучше отделить загрязнения от поверхности кожи.

Как выбрать режим и мощность?

Для выбора режимов пользуйтесь кнопками вверх / вниз, мощность регулируется кнопками влево / вправо. Знакомство с аппаратом рекомендуется начинать с минимального уровня мощности. Если вы уже пользовались прибором, выбирайте уровень мощности в зависимости от потребностей и чувствительности кожи.

Подходит ли данный прибор для несовершенной кожи?

Аппарат работает в соответствии с биологическими циклами и предназначен для лиц старше 20 лет.

Прибор подходит для всех типов кожи?

Да. Для жирной кожи рекомендуем использовать высокий уровень мощности, а для сухой и чувствительной — более низкий.

Подходит ли прибор для использования в ванной?

В аппарате не предусмотрен высокий уровень защиты от влаги, поэтому его применение в процессе принятия ванны или душа запрещается. Рекомендуем пользоваться прибором в сухих помещениях.




## Технические характеристики

Частота .....	1 МГц
Мощность .....	4 Вт
Входные параметры адаптера .....	100-240 В ~50 / 60 Гц, 0,4 А
Выходные параметры адаптера .....	9 В, 1,5 А
Время полной зарядки .....	~3,5 часа
Размер экрана .....	1,5 дюйма
Функция кнопок вверх / вниз .....	Выбор режима
Функции кнопок влево / вправо .....	Выбор мощности
Функция кнопки ОК .....	Подтверждение, вкл / выкл, пауза
Режимы .....	5 режимов
Материал электродов .....	Нержавеющая сталь
Материал корпуса .....	ABS-пластик
Вес прибора с базой .....	353 г

*Параметры данного продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.*



## Комплектация

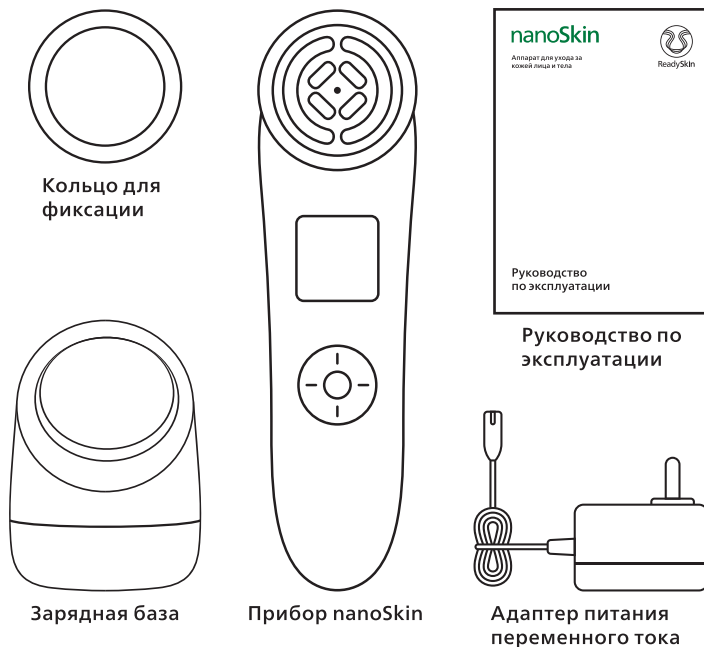

## Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от  $+5$  до  $+40$  ° и относительной влажности воздуха до 80 % в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию.

Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

## Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

*Гарантийный период на изделие ReadySkin nanoSkin составляет 12 месяцев с даты получения товара.*

## Сертификация и гарантия

ReadySkin соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза 020 / 2011, 004 / 2011 и 037 / 2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- Не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- Отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменении конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- Отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;



- Наличие целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия;
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

## Правила утилизации



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор.

**Производитель**

Shenzhen Kizoku Life Technology Co., Ltd. , Bldg. B, Funing Hi-Tech Industrial Park, No.71-2, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen 518103

Сделано в КНР.

**Импортер**

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, помещение 12Н

**Горячая линия**

**8 800 775-56-29** звонок по России бесплатный


**Дата производства**

3 кв. 2023 г.





ReadySkin

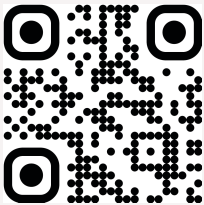

[readyskin.su](https://readyskin.su)

