

**Нежный уход  
без хлопот!**



**Массажер для кожи  
вокруг глаз КТ-3121**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)  
**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство массажера .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12

## Общие сведения

Массажер для кожи вокруг глаз КТ-3121 поможет подтянуть кожу, замедлить появление морщин, избавиться от отеков и темных кругов под глазами. Массажер отлично подходит для зоны вокруг глаз и губ. При желании вы также можете выполнять массаж всего лица.

У массажера КТ-3121 есть два режима работы — введение косметических средств в глубокие слои кожи и расслабляющий, успокаивающий массаж. В режиме введения косметических средств массажер воздействует на кожу лица постоянной вибрацией и красным LED-излучением, помогая в борьбе с отеками и морщинами. При помощи тока массажер КТ-3121 вводит косметические средства в глубокие слои кожи, тем самым увеличивает их эффективность. В режиме расслабляющего массажа подаются прерывистые вибрации и LED-излучение синего спектра, успокаивая и восстанавливая кожу и мышцы вокруг глаз. LED-излучение синего спектра помогает в борьбе с высыпаниями на коже. В обоих режимах выполняется ионофорез и тепловое воздействие, которые также помогают в борьбе с возрастными изменениями и следами усталости на коже. Однако следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для кожи вокруг глаз КТ-3121 не является медицинским прибором и используется только в профилактических и косметологических целях.

Включить и выключить массажер, а также переключать режимы очень просто — для этого на корпусе массажера есть всего одна кнопка. Также режимы можно переключать, встряхнув массажер.


Массажер для кожи вокруг глаз очень компактный и легкий. Вы можете брать его с собой и делать массаж в любом удобном месте. Крышка массажера защищает рабочую поверхность от повреждений и грязи.

## Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Крышка массажера — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера

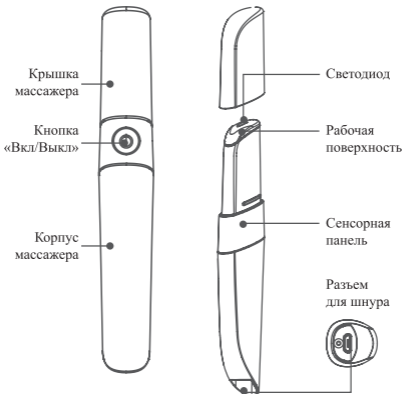

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер, а также переключает режимы.

Сенсорная панель предназначена для защиты от случайного включения массажера — если вы случайно нажали на кнопку «Вкл/Выкл», массажер не начнет работать сразу. После включения массажера кнопкой «Вкл/Выкл» коснитесь сенсорной панели рукой, которой держите массажер. Рабочей поверх-



ностью дотроньтесь до кожи лица. Только тогда массажер начнет работать.

Если через 3 минуты после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» вы не пользуетесь массажером, он автоматически отключится.

Светодиод не только воздействует на кожу, но и служит индикатором:

- непрерывно горит красный свет — массажер в режиме введения косметических средств в глубокие слои кожи;
- непрерывно горит синий свет — массажер в режиме расслабляющего массажа;
- три раза мигает красный свет, три раза мигает синий свет, затем светодиод не горит — массажер разрядился;
- мигает красный свет — идет зарядка;
- мигает синий свет — зарядка завершена.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Достаньте массажер из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и рабочую поверхность сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

### **Зарядка аккумулятора**

Если при работе массажера вибрация остановилась, и светодиод мигает, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Если при включении устройство не работает, и светодиод не горит, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой комплектный шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx$  5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, светодиод мигает красным светом. При полном заряде светодиод мигает синим светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разрядности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки массажер не включать.



Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 40 минут.

### **Использование**

1. Очистите кожу лица привычным средством для умывания. Затем просушите полотенцем или бумажными салфетками кожу лица. Вы также можете дать коже лица высохнуть естественным путем.
2. Откройте крышку массажера. Протрите рабочую поверхность массажера тканью или ватным диском. Для дезинфицирования можно использовать хлоргексидин. Не используйте спирт и другие сильные средства для очистки рабочей поверхности, чтобы не повредить ее.
3. Для режима введения косметических средств в глубокие слои кожи необходимо использовать крем. Для режима расслабляющего массажа использование крема не обязательно. Однако крем облегчает скольжение рабочей поверхности массажера и увлажняет кожу лица.
4. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится в режиме введения косметических средств в глубокие слои кожи. Для переключения режимов встряхните массажер или нажмите кнопку «Вкл/Выкл».

5. Возьмите массажер в руку так, чтобы один или несколько пальцев касались сенсорной панели, и вам было удобно держать массажер.
6. Коснитесь рабочей поверхностью кожи лица, массажер начнет работать. Плавно перемещайте массажер по массажным линиям (картинки 1–3, 5, 6). Для воздействия на массажные точки, показанные на картинке 4, останавливайтесь на них и слегка нажимайте. Не давите слишком сильно. Рекомендуемая продолжительность массажа одной зоны 3–5 минут.

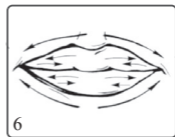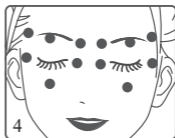

7. Чтобы отключить массажер, нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Очистите массажер от остатков крема влажной, затем сухой мягкой тканью. Закройте рабочую поверхность крышкой.



## Чистка и обслуживание

Очищайте массажер после каждого использования. Также рекомендуется очищать массажер перед проведением массажа. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для чистки рабочей поверхности допускается использовать ватный диск, мягкие ткань или губку, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса прибора и на разъем для шнура.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», закройте крышкой и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 30–45 минут. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер примерно раз в 6–12 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

Устройство не включается, светодиод не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с главой «Зарядка массажера»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Массажер не работает, светодиод горит

Возможная причина	Решение
Рабочая поверхность не касается кожи или вы не касаетесь сенсорной панели	Чтобы массажер начал работать, необходимо одновременно касаться сенсорной панели рукой, которой вы держите массажер, и рабочей поверхностью касаться кожи лица

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB=5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,32 А\*ч (1,184 Вт\*ч)
5. Время зарядки: 1–2 ч
6. Время работы от аккумулятора: до 1,5 ч
7. Температура нагрева: 40 ±2 °С
8. Уровень шума: ≤4,9 дБ
9. Длина шнура Micro-USB: 0,5 м
10. Размер устройства: 22 × 22 × 144 мм
11. Размер упаковки: 91 × 43 × 178 мм
12. Вес нетто: 0,06 кг
13. Вес брутто: 0,18 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Кизоку Лайф Текнолэджи Ко., Лтд. 10/Ф, №71-3; 301С, №71-2, Синьтянь Кэмпьюнити, Синьтянь Роуд, Фуюн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени),  
info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и рабочей поверхности вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах,

- офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
  - Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
  - Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
  - Не переносите массажер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении от источника питания.
  - Не используйте устройство, если шнур питания, разъем шнура питания или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
  - Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  - Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  - Не оставляйте работающий массажер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. При наличии хронических или острых заболеваний перед использованием прибором необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

IM-1





Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87